
Simplemente eficaz.





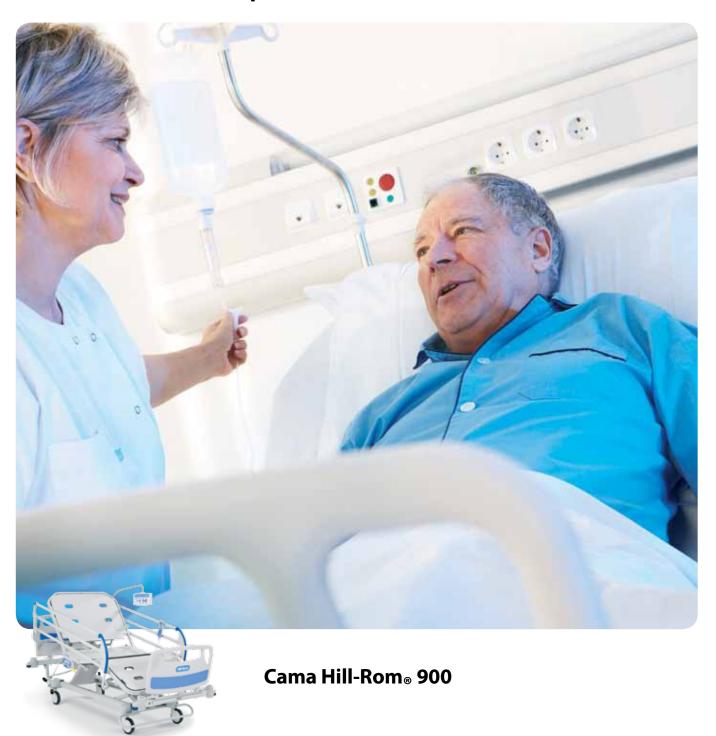

Fácil de cuidar.

La cama 900 de Hill-Rom_® está fabricada para lograr sencillez, cada función está específicamente diseñada para facilitar el uso y proporcionar seguridad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

Intuitiva



Los controles de la cama con iconografía intuitiva permiten un fácil acceso a las funciones de la cama. Las funciones fáciles de usar simplifican las tareas diarias del personal de enfermería al mismo tiempo que mejoran la autonomía y comodidad del paciente. Lo que significa que el tiempo que se utiliza para movilizar la cama se reduce y aumenta el tiempo de cuidado de sus pacientes.

Ergonómica



Con la ayuda de los asociados de asistencia sanitaria, hemos estudiado las formas en las que el personal asistencial trabaja alrededor de la cama y hemos colocado los controles Point-of-Care™ convenientemente en los sitios en los que el personal asistencial trabaja más: al lado del paciente. En nuestro objetivo de promover la ergonomía, y debido a que el personal asistencial debe elevar y descender las barandillas hasta 16 veces por día*, hemos colocado nuestro cierre de barandillas a la altura de trabajo del personal asistencial. Lo que elimina posiciones no ergonómicas y movimientos innecesarios alrededor de la cama.



Posición de salida accionada

con un botón

* Investigación de Hill-Rom®

Posición extendida accionada

con un botón



Fácil de mover.

La movilización de pacientes sin comprometer su seguridad es esencial para promover la recuperación de los pacientes. La cama 900 de Hill-Rom_® ofrece funciones para ayudar al progreso del paciente a través de los diferentes círculos de movilidad: desde darse la vuelta o reposicionarse, hasta ponerse de pie y salir de la cama.

Logre un entorno más seguro para la espalda

La autonomía y rehabilitación del paciente y el menor esfuerzo del personal asistencial van de la mano. La cama 900 de Hill-Rom_® está diseñada para facilitar la movilidad del paciente de forma segura y eficaz.



El indicador de ángulo Line-of-site₁ le asiste en la colocación del paciente en el ángulo deseado de elevación.



Una sola pulsación del botón EasyChair™ permite movilizar el paciente hasta una posición de sentado completa. Asimismo, se puede regresar al paciente a una posición extendida y baja muy fácilmente utilizando un control único.



El diseño ergonómico permite que el paciente participe en la movilidad (por ejemplo, en la nueva colocación en la cama y giro bidireccional) promoviendo de esta manera la autonomía y rehabilitación.

Fácil de mover.

Logre un entorno de No Falls.. (sin caídas)

Las funciones ergonómicas de la cama 900 de Hill-Romø están diseñadas para mejorar la seguridad y eficacia de la movilidad del paciente. Una pulsación del control es todo lo necesario para que la cama 900 de Hill-Romø realice la colocación adecuada para una salida segura del

paciente. Una ayuda valiosa para el personal asistencial, las manillas de salida retráctiles se pueden elevar con un solo movimiento y asegurar para proporcionar un soporte firme para que el paciente pueda salir de la cama.





Logre un entorno de Safe Skin.. (piel segura)

La prevención y el tratamiento de las úlceras de presión y lesión de tejidos requieren una combinación de protocolos y herramientas, en las que la articulación de la cama y las opciones de superficie son las claves del éxito.

Movimientos sincronizados de la cama

Los movimientos sincronizados de la cama garantizan una comodidad y postura únicas para el paciente junto con una compresión abdominal, cizallamiento y fricción mínimos.





Con facilidad para crear un entorno seguro.

Puesto que el número de pacientes con problemas de movilidad continúa aumentando (y con un aumento en el riesgo de deslizamientos, tropiezos y caídas), Hill-Rom_® ayuda a proteger a sus pacientes de posibles lesiones, haciendo que el entorno alrededor de la cama sea tan seguro como sea posible.

Reduzca el riesgo de caídas del paciente

Luz de noche inteligente

Con solo una mirada, el personal asistencial puede determinar si la cama se encuentra en la posición más segura para dormir, incluso desde fuera de la habitación del paciente. La luz de noche se iluminará en color verde si la cama se encuentra en la posición más baja. También ilumina el espacio del suelo circundante en el punto en el que el paciente sale de la cama para guiarlo en una habitación oscura o con escasa iluminación previniendo así que se tropiece.

Si la cama se eleva desde la posición más baja, la luz de noche se iluminará en color naranja. Una luz de advertencia en el panel de control también alertará al personal asistencial.

Control de seguridad



El sistema de bloqueo doble en las barandillas está diseñado para prevenir el descenso accidental de éstas. Reduzca el riesgo de inmovilizaciones del paciente



Tomamos muchas precauciones para maximizar la compatibilidad entre la cama, el colchón, las barandillas y los accesorios.



El sujetador del colchón ajustable se adapta automáticamente al ancho del colchón para reducir el riesgo de que el paciente se vea inmovilizado entre el colchón y la barandilla. También permite que la cama se adapte a una gran variedad de superficies.

Reduzca el riesgo de infecciones



El diseño abierto facilita la descontaminación y desinfección.


Las superficies lisas y paneles desmontables facilitan la descontaminación y limpieza con vapor o con productos químicos.

Simplemente fiable.

Calidad de Hill-Rom®

El nuevo sistema de altura variable de la cama 900 de Hill-Rom_® está diseñado para ser fuerte y fiable. Dos puntos de apoyo en cada estructura de base y en la cama distribuyen la carga de manera uniforme en toda la cama para lograr así una estabilidad lateral óptima.



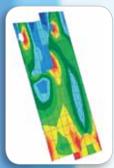

Una simulación asistida por ordenador del estrés de los brazos de la grúa ayudaron a determinar el diseño y material de estos componentes críticos. Esta característica del diseño permite que la cama mantenga una seguridad completa después de una prueba de carga de 880 kg.

Probada teniendo en cuenta los estándares de Hill-Rom.

Requisitos del EN 60601-2-52 (2010)

Hill-Rom.

Comparación de protocolos de pruebas de la cama 900 de Hill-Rom_®




Pruebas de cargas totales

Carga total en kg

La cama 900 de Hill-Rom_® ha sido probada superando los requisitos normativos del laboratorio de pruebas certificado de Hill-Rom_® para garantizar un producto altamente fiable durante toda su vida útil.

En total, se aplicó a la cama una carga cumulativa de más de 14 M Kg.*, que es más de 6 veces el valor requerido por el estándar EN 60601-2-52 (2010).

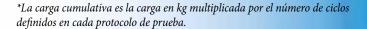



Los controles de la cama han sido sometidos a una verificación de calidad total, incluyendo pruebas de pulverización, uso y caída.



Diseñado para un servicio eficaz



El diseño sencillo de la cama 900 de Hill-Rom_® combinado con las capacidades totales de servicios de Hill-Rom_® garantizan que su hospital pueda lograr un retorno de inversión máximo.

Se ha prestado especial atención para poder proporcionar un acceso fácil y seguro a los principales componentes a fin de simplificar las operaciones de mantenimiento de rutina. Solo se necesitan cinco herramientas para cubrir todos los procedimientos de mantenimiento.



El monitor de asistencia de Hill-Rom_® alertará a los usuarios de la necesidad de una verificación del mantenimiento de rutina, garantizando que la cama sea siempre segura para los pacientes y personal asistencial y trabajando a su funcionalidad óptima. Esta herramienta está también diseñada para ofrecer una clara indicación de la forma de uso de la cama, garantizando un manejo más eficaz de las distintas camas.



Nuestro sistema patentado permite que las ruedas se retiren y coloquen horizontalmente desde el lateral de la cama para lograr una limpieza o sustitución más rápidas y fáciles.

Servicios de Hill-Rom_®

Hill-Rom_® ofrece una gama de servicios específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de las instalaciones de asistencia sanitaria. El servicio de repuestos online de Hill-Romo proporciona un acceso las 24 horas los 7 días de la semana de visualización y pedidos de repuestos. Los clientes pueden también descargar los manuales de usuario y de servicio y demás documentos técnicos relacionados con sus productos.



Motivados por las necesidades de nuestros clientes

Desde su fundación en 1929, Hill-Rom_® se ha dedicado a ofrecer productos, servicios y consultoría de innovación y gran calidad que ayudan a crear entornos de cuidado más seguros y terapias clínicamente eficaces.

Siempre pensando en usted

Representado por 6 500 personas en más de 80 países, Hill-Rom_{*} es un asociado global de asistencia sanitaria con una fuerte presencia local.

Inspirados por sus desafíos diarios

El programa Progressive Mobility de Hill-Rom estableció el concepto de movilidad en cualquier etapa del cuidado del paciente. Safe Skin, No Falls, Clear Lungs y Safe Backs tratan cuatro objetivos de seguridad importantes para proporcionar experiencia clínica y tecnologías innovadoras con el fin de obtener mejores resultados.

Cubriendo activamente la uniformidad en el cuidado

Las soluciones de Hill-Rom_® están diseñadas para cubrir una gran cantidad de necesidades en áreas de recuperación de emergencia, salas dilatación parto, bariátricos, cuidados intensivos, cuidados agudos, cuidados a largo plazo y atención domiciliaria.

Hill-Rom and Design y la marca denominativa Hill-Rom son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hill-Rom Services Inc. Auto Contour, Point-of-Care Controls, No Falls, Safe Skin, Safe Backs, EasyChair y Line-of-Site son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hill-Rom Services, Inc.





Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan._™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 41100
Deutschland	+49 (0)211 16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+ 39 (0)2 95054
Suisse/Schweiz	+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig)	+41 (0)21 706 21 38

	Österreich	+43 (0)2243 28550
	Ireland	+353 (0)1 413 6005
	Iberia	+34 (0)93 6856000
	Nordic Countries	+46 (0)920 47 47 11
	Export C	ontact your local Hill-Rom _®
distributor or contact your Area Manager v		
	website or call	+1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom_® se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía de Hill-Rom_® es la garantía expresa por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos. © 2010 Hill-Rom SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS